

# Портативный ирригатор Xiaomi Oclean W1

Руководство пользователя



1. Тип товара: портативный ирригатор

2. Характеристики

- Тип: портативный ирригатор
- Максимальное давление жидкости: 140 кПа
- Частота пульсации: 1300 Гц
- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
- Количество режимов работы: 3
- Материал корпуса: тритан, АБС-пластик
- Размеры (с установленной насадкой): 239 x 33,9 x 41,3 мм
- Вес: 159 г
- Размеры упаковки: ~240 x 165 x 90 мм
- Вес в упаковке: ~540 г
- Страна-производитель: КНР

### 3. Меры предосторожности

Перед использованием устройства необходимо проконсультироваться со стоматологом.

Противопоказания:

- гингивит,
- пародонтит,
- стоматит,
- пульпит,
- травматические поражения десен,
- наличие глубоких кариозных полостей и клиновидных дефектов поздних стадий,
- истончение эмали.

Используйте ирригатор исключительно для очистки ротовой полости. Струя воды, направленная в глаза, нос, уши или горло, может нанести серьезную травму. В случае проведения лечения в ротовой полости, а также при тяжелых формах пародонтита перед применением прибора проконсультируйтесь у стоматолога.

Во время использования не прижимайте насадку ирригатора слишком сильно к зубам или деснам, так как это может вызвать их повреждение. Не наливайте в резервуар воду, температура которой превышает 40 °С.

Поддерживайте гигиеническую чистоту прибора. Не заливайте в резервуар никаких жидкостей, кроме питьевой воды.

После использования прибора обязательно вылейте остатки воды из емкости для воды и включите прибор на 2-3 секунды для его полного осушения. В случае несоблюдения санитарно-гигиенических норм использования прибора в нем способны развиться плесень и бактерии, что может нанести вред здоровью.

Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без соответствующих знаний и опыта. Использование прибора такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, и при условии предоставления с его стороны четких инструкций по работе с прибором.

Дети должны использовать устройство под присмотром взрослых. Минимальный возраст для использования устройства составляет 7 лет.

iG-store не несет ответственности за возможные последствия использования прибора, вызванные неправильной эксплуатацией и несоблюдением правил техники безопасности.

#### 4. Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием ирригатора рекомендуется полностью зарядить его аккумулятор. Для этого воспользуйтесь шнуром с магнитным коннектором, который входит в комплект.

Присоедините коннектор к контактам на корпусе прибора.



Затем подключите шнур к любому разъему USB с силой тока не менее 1 А. Время полной зарядки составляет ~3 часа. Отслеживать ход зарядки вы можете с помощью кольцевого светодиодного индикатора на корпусе.



Индикатор мигает во время зарядки и горит непрерывно после ее завершения.

Красный цвет индикатора сообщает о низком уровне заряда батареи.


## 5. Управление работой ирригатора

Перед началом использования установите на ирригатор насадку. Снимите резервуар для воды, расположенный в нижней части корпуса. Он крепится на магните.



Наполните резервуар чистой питьевой водой почти до самого верха, а затем установите на место.

Для включения и отключения ирригатора нажмите и удерживайте основную кнопку в течение 2-3 секунд. Для выбора режима работы используйте клавишу, расположенную выше.

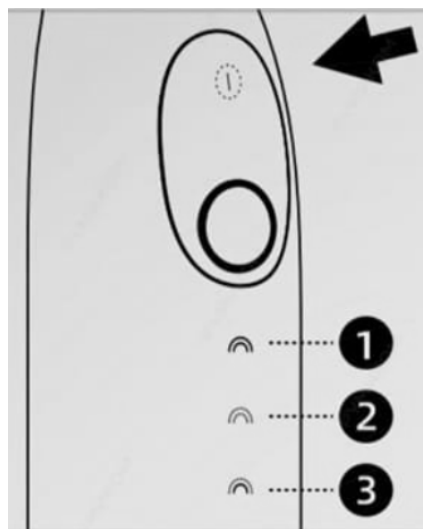

## 6. Использование ирригатора

Общие рекомендации по использованию устройства

- Почистите зубы перед использованием ирригатора.
- Наклонитесь над раковиной – при использовании ирригатора вода должна свободно вытекать из ротовой полости.
- Начните с минимального давления и постепенно увеличивайте его.
- Используйте менее мощный режим для гидромассажа десен и более мощный для удаления зубного налета.
- Продвигайтесь от передних зубов к коренным. Сначала очищайте переднюю и заднюю плоскости зуба, затем межзубный промежуток и область контакта зуба и десны.
- Удерживайте ирригатор так, чтобы водяная струя встречалась с очищаемой поверхностью под прямым углом.
- После использования устройства тщательно прополощите рот, чтобы удалить загрязнения.

После использования ирригатора выключите устройство, снимите резервуар с водой и слейте остатки в раковину. Установите резервуар на место.

Перед началом использования мы рекомендуем ознакомиться с любой из популярных видеоинструкций на **YouTube**. Их можно найти по запросу «Как пользоваться ирригатором».

## 7. Комплектация

- Ирригатор Xiaomi Oclean
- Сменные насадки – 2 шт.
- Кабель USB для подзарядки аккумулятора
- Документация

## 8. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР